


Расходные и вспомогательные материалы для ЭКО

ДИА-М
современная лаборатория

Камера Маклера для подсчета сперматозоидов

Используются для подсчета концентрации сперматозоидов; быстрый подсчет: нет нужды вводить поправку на разведение образца, поскольку количество спермиев в 10 квадратах соответствует их концентрации в млн/мл.


- постоянный объем камеры — 10 мкл;
- решетка, нанесенная на покровное стекло, повышает четкость изображения;
- толщина зазора — 10 микрон, что позволяет расположить сперматозоиды в фокальной плоскости.

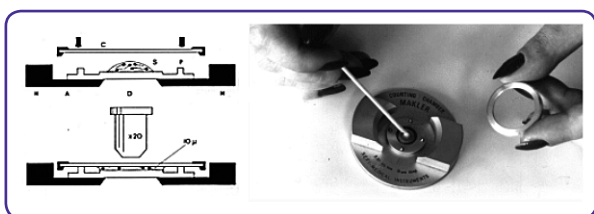

Шприцы для переноса эмбрионов, Hamilton

Применяются для переноса эмбрионов в матку:

- впрыск осуществляется медленно и плавно, в отличие от «инсулиновых» шприцов;
- объем дозирования, мкл — 5, 10, 25, 50, 100, 250 и 500;
- наконечник типа Луер обеспечивает совместимость с катетерами и медицинскими иглами;
- корпус выполнен из боросиликатного стекла;
- выдерживают многократное автоклавирование.

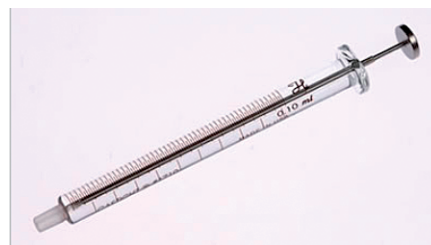

Пробирки для криоконсервации биологического материала



Предназначены для заморозки биологического материала при температуре жидкого азота

- Объем пробирок — 1,2/ 2,0/ 4,0 мл;
- поле для маркировки;
- выдерживают температуру до — 196 °С;
- стерилизованы гамма-излучением;
- сертифицированы на апирогенность;
- градуировка черного цвета;
- круглое или коническое дно;
- исполнение: свободностоящее (с «юбкой») или без;
- имеют силиконовую прокладку под крышкой;
- цветные вставки для цветовой идентификации;
- имеют сертификат качества на отсутствие РНК-аз, ДНК-аз.

Москва ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

ДИА-М
современная лаборатория

Новосибирск
пр. Акад.
Лаврентьева, 6/1
тел./факс:
(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Казань
ул. Парижской
Коммуны, д. 6
тел./факс:
(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru


Санкт-Петербург
ул. Профессора
Попова, 23
тел./факс:
(812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
пер. Семашко, 114
тел./факс:
(863) 250-0006
rnd@dia-m.ru

Пермь
Представитель
в УФО
тел./факс:
(342) 202-2239
perm@dia-m.ru

Воронеж
тел./факс:
(473) 232-4412
voronezh@dia-m.ru


Расходные и вспомогательные материалы для ЭКО

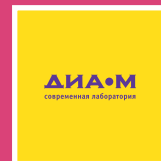

Капилляры для инъекции сперматозоидов, удержания яйцеклеток и переноса, Eppendorf


Сертифицированы на цитотоксичность, зарегистрированы в РФ как изделия медицинского назначения (РУ № ФСЗ 2009/05567), а также имеют Сертификат качества Содружества немецких врачей общей медицины (FDA) и Сертификат качества Медицинского продукта, согласно Европейскому законодательству.

Изготовлены из стекла; стерилизованы гамма-излучением; внешний диаметр — 1 мм.

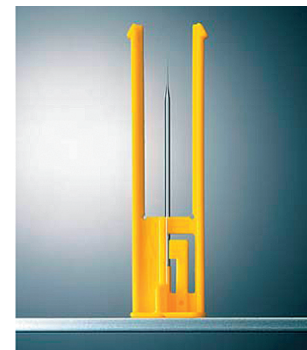

Капилляры VasciTip для удержания суспензионных клеток (ооцитов или бластоцитов)

- Запаяны в индивидуальную упаковку;
- специальный держатель для обеспечения механической защиты;
- внутренний диаметр — 15 мкм, внешний диаметр — 1,0 мм;
- угол загиба — 35°; длина загиба — 1,0 мм.

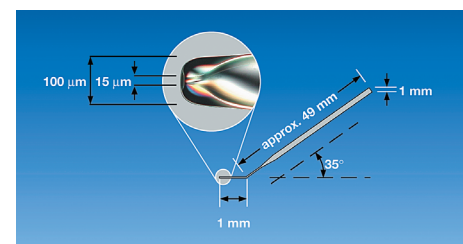




Капилляры TransferTip для инъекции сперматозоидов методом ИКСИ

- Запаяны в индивидуальную упаковку;
- специальный держатель для обеспечения механической защиты;
- внутренний диаметр — 4 мкм, внешний диаметр — 7 мкм;
- угол загиба — 35°.

Капилляры **TransferTip-RP** длина загиба 0,5 мм.

Капилляры **TransferTip-F** длина загиба 0,4 мм.

Капилляры **TransferTip-R** длина загиба 1 мм.

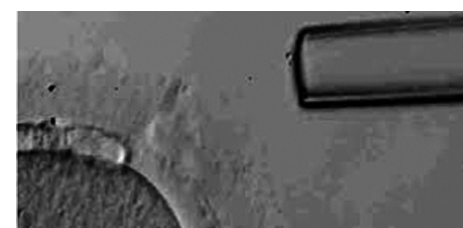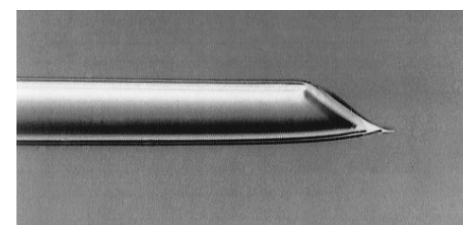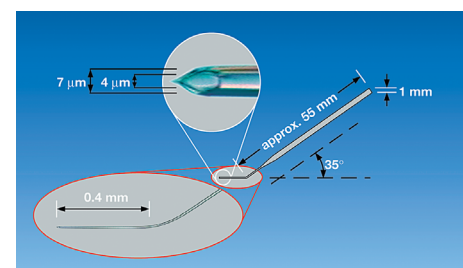

Капилляры Polar Body Biopsy Tip MML для биопсии

- Для забора биопсийного материала при проведение ПГД
- запаяны в индивидуальную упаковку;
- специальный держатель для обеспечения механической защиты;
- внутренний диаметр — 15 мкм, внешний диаметр — 20 мкм;
- угол загиба — 35°; длина — 1,9 мм;

Реактивы для работы с клеточным материалом



Культуральные среды, БСА, ХЕПЕС, ПВП, энергетические субстраты для сред, антибиотики для сред, минеральные масла для покрытия среды и предотвращения ее высыхания и др.

- M8410-100ML Масло минеральное легкое, тестировано на эмбрионах мыши (для ИКСИ), Sigma-Aldrich, 100 мл
- M8410-500ML Масло минеральное легкое, тестировано на эмбрионах мыши (для ИКСИ), Sigma-Aldrich, 100 мл.

Подробные спецификации, каталоги и заказ продукции на сайте

www.dia-m.ru
заказ on-line