



МЕНЮ ТЕСТОВ

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ

	кат. №	Тестов в наборе
B.R.A.H.M.S PCT (Прокальцитонин)	30 450	60 тестов

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Troponin I Ultra	30 448	60 тестов
hsTroponin I*	415 386	60 тестов
Myoglobin	30 446	30 тестов
CK-MB	30 421	30 тестов
NT-proBNP2*	30 458	60 тестов
Digoxin	30 603	60 тестов

ТРОМБОЗ / ТРОМБОЭМБОЛИЯ

D-Dimer Exclusion™ II	30 455	60 тестов
------------------------------	--------	-----------

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ

HBs Ag Ultra	30 315	60 тестов
HBs Ag Ultra Confirmation	30 317	30 тестов
Anti-HBs Total II*	30 318	60 тестов
Anti-HBc Total II	30 314	60 тестов
HBc IgM II	30 439	30 тестов
HBe-Anti HBe	30 305	30 тестов
HAV IgM	30 307	30 тестов
Anti-HAV Total	30 312	30 тестов
Anti-HCV*	30 308	60 тестов

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ

HIV DUO Ultra	30 443	60 тестов
HIV DUO Quick	30 447	60 тестов
HIV P24 II	30 117	30 тестов
HIV P24 II Confirmation	30 444	60 тестов

ToRC

CMV IgG	30 204	60 тестов
CMV IgM	30 205	30 тестов
Rub IgG II	30 221	60 тестов
Rub IgM	30 214	30 тестов
Toxo IgG II	30 210	60 тестов
Toxo IgG Avidity	30 222	30 тестов
Toxo IgM	30 202	60 тестов
Toxo Competition	30 211	60 тестов

ПРОЧЕЕ

Measles IgG (корь)	30 219	60 тестов
Mumps IgG (паротит)	30 218	60 тестов
Varicella-Zoster IgG	30 217	60 тестов
H.pylori IgG	30 192	30 тестов
EBV VCA IgM	30 237	30 тестов
EBV VCA/EA IgG	30 236	30 тестов
EBV EBNA IgG	30 235	30 тестов

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИГЕНОВ

C. difficile Toxin A & B	30 118	60 тестов
-------------------------------------	--------	-----------

ИММУНОХИМИЯ

СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

	кат. №	Тестов в наборе
Estradiol II	30 431	60 тестов
FSH	30 407	60 тестов
HCG	30 405	60 тестов
LH	30 406	60 тестов
Prolactin	30 410	60 тестов
Progesterone	30 409	60 тестов
Testosterone	30 418	30 тестов
Testosterone II*	414 320	30 тестов

ФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

TSH	30 400	60 тестов
TSH3	30 441	60 тестов
FT4	30 459	60 тестов
FT3	30 402	60 тестов
T3	30 403	60 тестов
T4	30 404	60 тестов
Anti-TPO	30 461	30 тестов
Anti-Tg	30 462	30 тестов

ОНКОМАРКЕРЫ

TPSA	30 428	60 тестов
FPSA	30 440	30 тестов
CEA (S)	30 453	60 тестов
AFP	30 413	60 тестов
CA 15-3	30 429	30 тестов
CA 19-9™	30 427	30 тестов
CA 125™	30 426	30 тестов

АЛЛЕРГОЛОГИЯ

Total IgE	30 419	60 тестов
------------------	--------	-----------

ПРОЧЕЕ

Cortisol S	30 451	60 тестов
Ferritin	30 411	60 тестов
Protein C	30 115	30 тестов
vWF, Фактор Виллебранда	30 436	30 тестов
β2 Microglobulin	30 420	30 тестов

* Тест на регистрации.



Стрипы на один образец



Готовые к использованию реактивы



Один набор для постановки анализа: стандарт, контроль и дилуэнт включены в набор

Vidas



ООО «биоМерье Рус»
115230, Россия, г. Москва,
1-й Нагатинский проезд, д. 10, стр. 1
Тел. +7 (495) 221 10 79
Факс +7 (495) 221 10 79
E-mail: ml-ru-office@biomerieux.com

Перечень продукции компании
biomerieux. Только для медицинских
работников в информационно-
ознакомительных целях
www.biomerieux.com
www.biomerieux-russia.com

Создан для вас

Vidas



Точность Надежность Удобство

качественная диагностика –
основа здоровья

BIOMÉRIEUX
PIONEERING DIAGNOSTICS

Vidas

Создан для вас

Системы серии VIDAS® получили признание во всем мире благодаря простоте, гибкости и надежности результатов. Сегодня мы предлагаем современные, отвечающие вашим потребностям приборы.

Анализаторы серии VIDAS® – оптимальное решение для любой лаборатории, в том числе для экспресс-диагностики.



Системы серии VIDAS: уникальные параметры и стильный дизайн

Современный дизайн

В ответ на ваши пожелания мы усовершенствовали дизайн:

- оптимизировали процесс загрузки тестов для рационализации рабочего процесса
- сделали ввод данных и работу с результатами еще более удобной

Преимущества системы

- Стрипы с готовыми к использованию реактивами рассчитаны на один образец (1 пациент = 1 тест)
- Все необходимые для анализа реактивы включены в набор
- Система надежна в работе (СВБР* > 452 суток)
- Калибровка выполняется каждые 14/28 суток
- Автоматическая идентификация штрих-кода
- Просто загрузите стрипы – остальное система сделает за вас

Гибкость в работе:

- Пять (VIDAS) / две (miniVIDAS) независимых секций, каждая на 6 тестов
- Возможно одновременное выполнение разных тестов
- Широкий выбор тестов (около 100 иммунохимических параметров)
- Наборы реактивов на разное количество тестов (30 или 60 тестов)

Качество

- Исключение перекрестной контаминации
- Референсные тесты: HIV DUO Ultra, D-Dimer Exclusion™, Toxo Avidity...
- Превосходная работа по данным многочисленных внешних исследований контроля качества

* Среднее время безотказной работы



Размеры анализатора VIDAS:
58 см (высота)
105 см (длина)
68 см (ширина)


Вес анализатора VIDAS:
65 кг

Электрические характеристики:
Напряжение: 100–240 В
Потребление: 3–1.2 А
Частота: 50–60 Гц
Мощность: 280 ВА максимум
Тепловыделение: около 921 БТЕ/час
№ по каталогу: 4700023

Размеры анализатора miniVIDAS:
58 см (высота)
45 см (длина)
55 см (ширина)

Вес анализатора miniVIDAS:
40 кг

Электрические характеристики:
Напряжение: 100–240 В
Потребление: 1.5–0.8 А
Частота: 50–60 Гц
Мощность: 150 Вт
Тепловыделение: около 512 БТЕ/час
№ по каталогу: 4700022

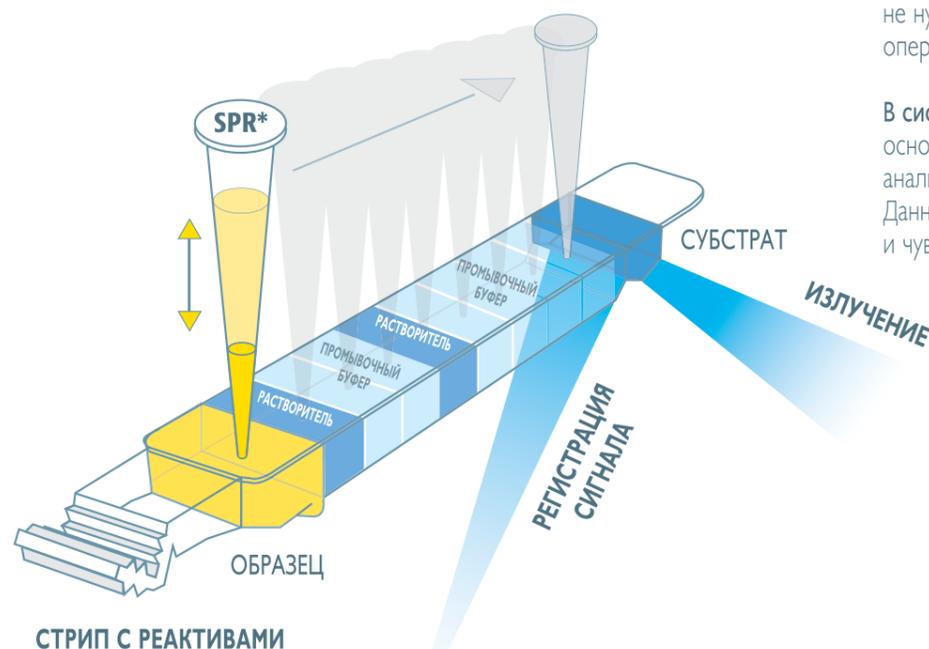

* SPR: наконечник пипетки – твердая фаза

Все очень просто

Система VIDAS использует стрипы с готовыми реактивами, рассчитанные на один образец

- 1• Наконечник SPR® используется в качестве твердой фазы; на его внутреннюю поверхность нанесены антитела / антигены.
- 2• Стрип содержит остальные необходимые для анализа реактивы.

Наконечник SPR является пипетирующим устройством

Наконечник перемешивает реакционную смесь в лунке на каждой стадии реакции. Оригинальная концепция исключает перекрестную контаминацию реактивов и образцов. Для проведения анализа не нужны пробирки, шприцы и иглы, что сводит к минимуму операции по обслуживанию системы.

В системе VIDAS используется метод ИФФА, основанный на сочетании иммуноферментного твердофазного анализа и флуоресцентного определения продуктов реакции. Данный метод обеспечивает высокую специфичность и чувствительность реакции.

